

mamajoo®



CZ Mamajoo Odsávačka mateřského mléka USB elektrická - Double

SK Mamajoo Odsávačka materského mlieka USB elektrická - Double



CZ Mamajoo Odsávačka mateřského mléka USB elektrická - Single

SK Mamajoo Odsávačka materského mlieka USB elektrická - Single

www.mamajoo.com

CZ Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Mamajoo. Při výrobě dětských výrobků Mamajoo je zdraví kojenců prioritou. V našich výrobních závodech, které splňují mezinárodní standardy, vyrábíme pouze produkty v souladu s evropskými standardy z vysoce kvalitních prémiových surovin bez BPA.

SK Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Mamajoo. Pri výrobe detských výrobkov Mamajoo je zdravie dojčiat prioritou. V našich výrobných závodoch, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy, vyrábame iba produkty v súlade s európskymi štandardmi z vysoko kvalitných prémiových surovín bez BPA.

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ / ZÁRUKA

TIPY

1. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.
2. Protože nepřicházejí do kontaktu s mateřským mlékem, motorová jednotka a její součásti, elektrický adaptér a vzduchová hadice a jejich vstupy by se neměly čistit ani sterilizovat. Před prvním použitím odstraňte všechny části pumpy, které přišly do styku s mateřským mlékem, důkladně omyjte teplou mýdlovou vodou, důkladně opláchněte a sterilizujte pomocí sterilizátorů Mamajoo nebo považením ve vodě po dobu 5 minut. Po každém použití také očistěte všechny části a před každým použitím znovu sterilizujte. Nesterilizujte déle, než je doporučeno, aby nedošlo k poškození
3. Vyhňte se součastem čerpadla.
NIKDY nenamáčejte motorovou jednotku a její součásti, elektrický adaptér a vzduchovou hadici, které nepřijdou do kontaktu s mateřským mlékem, ani je nečistěte mokřým hadříkem.
4. K čištění produktu nepoužívejte leštící, abrazivní nebo antibakteriální prostředky, protože by mohly poškodit vaše zařízení.
5. Pro provoz elektronické odsávačky mateřského mléka Mamajoo s USB připojením používejte pouze originální adaptér. Po každém použití se ujistěte, že je zařízení vypnuté a zástrčka vytažená ze zásuvky.
6. Přeplnění malých kojeneckých lahví by poškodilo motor. Pokud odsajete více než 120 ml mléka, použijte prosím velkou láhev.
7. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí.
8. Velmi silný a rychlý sací rytmus může způsobovat bolest, proto se ujistěte, že máte nastavenou správnou sílu sání. Doporučujeme v závěrečné fázi nepoužívat odsávačku mléka, s výjimkou speciálních případů, jako je mastitida.
9. Před každým použitím se ujistěte, že komfortní nástavec správně sedí na trychtýřovitém otvoru, jinak může dojít k úniku mléka.
10. V případě poruchy odpojte zařízení ze zásuvky nebo zdroje USB. Pokud potřebujete údržbu, můžete nás kontaktovat, abychom vás mohli odkázat na náš zákaznický servis.
11. Nevytahujte prosím zástrčku elektronické dvojité odsávačky mateřského mléka Mamajoo příliš silou
12. Vždy dodržujte návod k obsluze. Naše společnost neručí za škody způsobené nesprávným používáním.
13. Nepoužívejte odsávačku mateřského mléka ve vaně nebo sprše.
14. Neumisťujte ani neskladujte odsávačku mateřského mléka v blízkosti vany nebo umyvadla.
15. Nesahejte na výrobek, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku.
16. Po použití vždy ihned odpojte odsávačku mateřského mléka.

3

2

17. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud byly pod dozorem nebo byly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
18. Nedovolte dětem nebo domácím zvířatům, aby si hrály s motorovou jednotkou, adaptérem nebo příslušenstvím, protože tyto části mohou představovat nebezpečí zadušení nebo uškrcení.
19. Před každým použitím zkontrolujte odsávačku mateřského mléka, zda nejeví známky poškození. Odsávačku mateřského mléka nepoužívejte, pokud je adaptér nebo zástrčka poškozená, nepracuje správně, upadla nebo byla ponořena do vody.
20. Nepoužívejte odsávačku mateřského mléka venku na místech, kde se používají spreje nebo kde se podává kyslík.
21. Odsávačka mateřského mléka není vhodná pro použití v blízkosti vysoce hořlavých směsí anestetik se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusnatým.
22. Komponenty v motorové jednotce odsávačky mateřského mléka nemohou být servisovány nebo opravovány uživatelem. Nepokoušejte se sami otevřít, opravovat nebo opravovat odsávačku mateřského mléka. V opačném případě bude vaše záruka neplatná.
23. Udržujte adaptér a silikonové hadice mimo dosah horkých povrchů.
Používejte pouze adaptér uvedený na zařízení.
24. Nepokoušejte se odstranit pouzdro pumpy z prsu, když je podtlak. Vypněte zařízení, prstem uvolněte trychtýř pumpy z hrudníku a pumpu vyjměte.
25. Nepoužívejte odsávačku během těhotenství, protože odsávání může vyvolat porod.
26. Nepoužívejte odsávačku mateřského mléka, pokud se cítíte ospalá.
27. Nevystavujte odsávačku mateřského mléka extrémnímu teplu nebo přímému slunečnímu záření.
28. Vždy začněte pumpovat v masážním režimu, abyste stimulovali relaxační reflex. Neodsávejte déle než 5 minut v kuse, pokud nelze mléko odsát. Zkuste pumpovat znovu v jinou denní dobu. Pokud se proces stane velmi nepříjemným nebo bolestivým, vyjměte pumpu a kontaktujte svou laktiční poradkyni.
29. Před každým použitím výrobek zkontrolujte a vyměňte opotřebované díly. Silikonové pohyblivé části (b, d, fah) se mohou během používání opotřebovat. Pokud například pokračuje čerpání s opotřebovanou membránou, mléko vyteče ze vzduchové hadice do motorové jednotky a motorová jednotka se poškodí.
30. Pokud ventil a membrána (g a h) nejsou řádně vyčištěny, zanesou se a nelze je správně používat. Po každém použití sejměte ventil a membránu a nechte několik minut v převařeně vodě, aby se odstranily zbytky mléka.

4

ÚDRŽBA

1. Motorovou jednotku čistíte POUZE suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte leštící, abrazivní nebo antibakteriální přípravky.
2. Pravidelně kontrolujte, zda jsou připojení ke vzduchové komoře v pořádku a ujistěte se, že ventil kachního hrdla neutrpěl žádné poškození.
3. Mechanické části pumpy a zásobníky na mléko lze bezpečně mýt v myčce nádobí, ale může dojít ke změně barvy od potravin.



Zkumavku nesterilizujte ani nemyjte. Voda v hadici může poškodit motor.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Plná kontrola díky nové vyvinuté mikroprocesorové technologii.
- Procesy a symboly lze sledovat na LCD displeji.
- Lze jej použít s externí nabíječkou (powerbankou) pro mobilní aplikace. Externí nabíječka musí mít kapacitu alespoň 2600 mA.

Model: MMJ2858

Adaptér: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC

Provozní doba: 0-30 Minuten

Hmotnost: 0.170 kg

Model: MMJ2841

Adaptér: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC

Provozní doba: 0-30 Minuten

Hmotnost: 0.150 kg



Elektronická dvojitá odsávačka mateřského mléka s USB připojením

Komponenty produktu

- Válcové víko
- Silikonová membrána
- Těleso čerpadla
- Komfortní upevnění
- Ventil
- Dudlík láhve, víčko, těsnící kotouč a těsnící kroužek
- 1 x zásobník na mateřské mléko (150 ml) 1 x tělo láhve (250 ml)
- Základna stojanu pro nádoby na skladování mateřského mléka
- Skříň motoru
- Vzduchová hadice
- Vzduchová hadice – vložka motorové jednotky
- Zástrčka
- AC/DC adaptér a kabel



Elektronická odsávačka mateřského mléka s USB připojením

Komponenty produktu

- Válcové víko
- Silikonová membrána
- Těleso čerpadla
- Komfortní upevnění
- Ventil
- Dudlík láhve, víčko, těsnící kotouč a těsnící kroužek
- Nádoba na uskladnění mateřského mléka 150 ml
- Stojan na skladovací nádoby
- Skříň motoru
- Vzduchová hadice
- Vzduchová hadice – vložka motorové jednotky
- AC/DC adaptér a kabel

NIKDY nesterilizujte tyto části: i, j, k, l, m


5

5

Montáž

Než začnete s montáží, pečlivě si umyjte ruce.

Před použitím omyjte a sterilizujte části pumpy, které přicházejí do styku s mateřským mlékem.

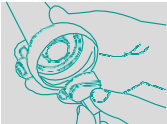

Zatlačte ventil do tělesa čerpadla.



Vložte silikonovou membránu do těla pumpy a ujistěte se, že je těsná.



Umístěte válcový kryt na tělo čerpadla.



Připojte vzduchovou hadici k válcovému víku.




Sestavte kojeneckou láhev/úložnou nádobu na tělese čerpadla.




Když jste na cestách, připojte konektor USB ke zdroji USB.



Dvojitá odsávačka
Vložte druhý konec vzduchové trubice do konektoru motorové jednotky.

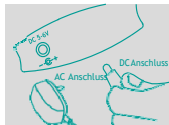


Dvojitá odsávačka
Kovovou zástrčku na konci kabelu adaptéru pevně zasuňte do vstupu adaptéru motorové jednotky (5V-6V) a zástrčku adaptéru do elektrické sítě (110V-220V).

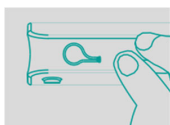

Dvojitá odsávačka
Pokud potřebujete čerpadlo používat samostatně, ujistěte se, že druhý přívod vzduchu je pevně uzavřen zátkou. Jinak vaše čerpadlo nebude sát.



Single odsávačka
Vložte druhý konec vzduchové trubice do konektoru motorové jednotky.

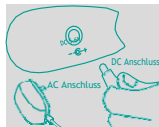

Single odsávačka
Kovovou zástrčku na konci kabelu adaptéru pevně zasuňte do vstupu adaptéru motorové jednotky (5V-6V) a zástrčku adaptéru do elektrické sítě (110V-220V).

7

7

POKyny PRO LED DISPLEJ

Mamajoo Odsávačka mateřského mléka USB elektrická - Double



8 různých masážních poloh

12 různých sacích pozic



Příklad




Dvojité čerpadlo v masážní poloze
Je nastavena 3. úroveň

Jedno čerpadlo v sací poloze
Je nastavena 7. úroveň

LED displej

- Režim masáže/sání s jedním čerpadlem
- Režim dvojitě masáže/sání
- Tlačítko pro zapnutí, vypnutí a volbu jednoduchého, dvojitěho čerpadla
- Tlačítko pro snížení síly sání
- Tlačítko pro zvýšení síly sání
- LED displej úrovně

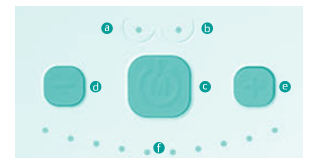

Odsávačka mateřského mléka USB elektrická - Single




5 různých masážních poloh



10 různých sacích pozic

LED displej

- Režim masáže
- Režim odsávání
- Tlačítko zapnutí/vypnutí a jednoduché, dvojitě nastavení
- Tlačítko pro snížení sacího výkonu
- Tlačítko pro zvýšení sacího výkonu
- LED displej úrovně

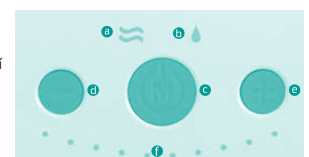

7

8

POUŽITÍ

Provoz sítě:

1. Ujistěte se, že je čerpadlo správně namontováno.
2. Pokud chcete svou dvojitou odsávačku Mamajoo používat samostatně, uzavřete prosím pevně druhou hadici zátkami na odsávače.
3. Posadte se do pohodlného křesla a relaxujte, vezměte pumpu do ruky, která vám usnadní její ovládání. Pumpu nepoužívejte vleže.
4. Umístěte pohodlný nástavec pumpy doprostřed bradavky a ujistěte se, že sedí vzduchotěsně a uprostřed hrudníku.
5. Zapojte výrobek do zásuvky, stiskněte tlačítko „on/off“ a spusťte proces vysávání. Doporučujeme nejprve použít pumpu v masážním režimu, aby se simuloval průtok mléka.
6. Odsávačky mateřského mléka Mamajoo simulují přirozený reflex sání dítěte.
- 6.1. Když jednou stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí na Mamajoo Electronic USB Single Breast Pump, rozsvítí se levá horní LED pro masážní režim, když tlačítko stisknete dvakrát, rozsvítí se pravá horní LED pro režim sání. Masážní režim je navržen tak, aby napodoboval „relaxační reflex“, jako by miminko sálo matčin prs. U prvních 5 masážních stupňů následuje dlouhé sání po každých 10 krátkých sání. Poté, co vaše mléko začne vytékat, stiskněte znovu tlačítko napájení pro spuštění režimu sání. Požadovaný rytmus sání můžete kdykoli nastavit pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ v jedné z 10 poloh sání. Mamininky s citlivými bradavkami mohou odsávat i masážním způsobem. Díky nově vyvinuté mikroprocesorové technologii se při příštím použití spustí v naposledy použitém režimu.
- 6.2. Jakmile stisknete tlačítko zapnutí/vypnutí, elektronická dvojitá/jednoduchá pumpa Mamajoo se spustí s režimem jednoduchého odsávání, takže si mamininky mohou vybrat mezi jednoduchým nebo dvojitým odsáváním. V obou režimech sání jsou první 4 úrovně (0-4) pro masážní režim a od 5 do 10 je 5 úrovní pro režim sání. Masážní poloha napodobuje normální rytmus sání miminka. K probuzení reflexu úniku. U prvních 4 masážních úrovní následuje dlouhé sání po každých 10 krátkých sání. Poté, co vaše mléko začne vytékat, znovu stiskněte tlačítko „+“ pro spuštění režimu sání. Rytmus sání si můžete vybrat mezi 5 a 10. Mamininky s citlivými bradavkami mohou sát v masážním režimu. Pokud chcete sát individuálně, udělejte Ujistěte se, že je to váš případ Je nastaven režim Single Díky nově vyvinuté mikroprocesorové technologii se vaše čerpadlo při příštím použití spustí v režimu jednoho sání v naposledy použitém režimu.

7. Po dokončení odsávání vypněte odsávačku mateřského mléka stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na 2 sekundy a vytáhněte ji ze zásuvky. Vyjměte zásobník na mateřské mléko z pumpy. Nasadte si savičku na láhev mamajoo a nakrmte své dítě nebo udržujte úložnou nádobu uzavřenou mamajoo pojistnými kroužky v chladničce nebo mrazáku.
8. Elektronické odsávačky mateřského mléka Mamajoo s USB připojením se automaticky vypínají po 30 minutách provozu v režimu sání.

Provoz přes USB připojení:

V zásadě nejsou velké rozdíly, pokud produkt provozujete z externí nabíječkou. Své zařízení můžete připojit k externí baterii, powerbance, počítači nebo nabíječce pomocí USB kabelu. Ujistěte se, že je zaručeno uvedené napětí.

VAROVÁNÍ

Výrobky lze přepravovat pouze v původním obalu, v souladu s pokyny na obalu, mimo dosah radiátorů, ohně a otřesů.

Distributor pro ČR:

KEOP Trading s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO: 10774955

Email: info@mamajoo.cz

9

10

SK

NÁVOD NA POUŽITIE / ZÁRUKA

TIPY

1. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Pretože neprichádzajú do kontaktu s materským mliekom, motorová jednotka a jej súčasti, elektrický adaptér a vzduchová hadica a ich vstupy by sa nemali čistiť ani sterilizovať. Pred prvým použitím odstráňte všetky časti pumpy, ktoré prišli do styku s materským mliekom, dôkladne umyte teplou mydlovou vodou, dôkladne opláchnite a sterilizujte pomocou sterilizátorov Mamajoo alebo povarením vo vode po dobu 5 minút. Po každom použití tiež očistite všetky časti a pred každým použitím znova sterilizujte. Nesterilizujte dlhšie, než sa odporúča, aby nedošlo k poškodeniu.
3. Vyhnite sa súčastiam čerpadla
NIKDY nenamáčajte motorovú jednotku a jej súčasti, elektrický adaptér a vzduchovú hadicu, ktoré neprídu do kontaktu s materským mliekom, ani ich nečistite mokrou handričkou.
4. Na čistenie produktu nepoužívajte leštiace, abrazívne alebo antibakteriálne prostriedky, pretože by mohli poškodiť vaše zariadenie.
5. Na prevádzku elektronickej odsávačky materského mlieka Mamajoo s USB pripojením používajte iba originálny adaptér. Po každom použití sa uistite, že je zariadenie vypnuté a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
6. Preplnenie malých dojčenských fľaš by poškodilo motor. Pokiaľ odsajete viac ako 120 ml mlieka, použite prosím veľkú fľašu.
7. Uchovávajte mimo dosahu dočiat a malých detí.
8. Veľmi silný a rýchly sací rytmus môže spôsobovať bolesť, preto sa uistite, že máte nastavenú správnu silu sania Odporúčame v záverečnej fáze nepoužívať odsávačku mlieka, s výnimkou špeciálnych prípadov, ako je mastitída.
9. Pred každým použitím sa uistite, že komfortný nástavec správne sedí na lievikovitom otvore, inak môže dôjsť k úniku mlieka.
10. V prípade poruchy odpojte zariadenie zo zásuvky alebo zdroja USB. Pokiaľ potrebujete údržbu, môžete nás kontaktovať, aby sme vás mohli odkázať na náš zákaznicky servis.
11. Nevytahujte prosím zástrčku elektronickej dvojitej odsávačky materského mlieka Mamajoo príliš silou.
12. Vždy dodržiavajte návod na obsluhu. Naša spoločnosť neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním.
13. Nepoužívajte odsávačku materského mlieka vo vani alebo sprche.
14. Neumiestňujte ani neskladujte odsávačku materského mlieka v blízkosti vane alebo umývadla.
15. Nesiachajte na výrobok, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite zástrčku.
16. Po použití vždy ihneď odpojte odsávačku materského mlieka.

17. Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak boli pod dozorom alebo boli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
18. Nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám, aby sa hrali s motorovou jednotkou, adaptérom alebo príslušenstvom, pretože tieto časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía alebo úškrtienia.
19. Pred každým použitím skontrolujte odsávačku materského mlieka, či nejavia známky poškodenia. Odsávačku materského mlieka nepoužívajte, ak je adaptér alebo zástrčka poškodená, nepracuje správne, spadla alebo bola ponorená do vody.
20. Nepoužívajte odsávačku materského mlieka vonku na miestach, kde sa používajú spreje alebo kde sa podáva kyslík.
21. Odsávačka materského mlieka nie je vhodná na použitie v blízkosti vysoko horľavých zmesí anestetík so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusnatým.
22. Komponenty v motorovej jednotke odsávačky materského mlieka nemôžu byť servisované alebo opravované užívateľom. Nepokúšajte sa sami otvárať, opravovať alebo opravovať odsávačku materského mlieka. V opačnom prípade bude vaša záruka neplatná.
23. Udržujte adaptér a silikónové hadice mimo dosahu horúcich povrchov.
Používajte iba adaptér uvedený na zariadení.
24. Nepokúšajte sa odstrániť puzdro pumpy z prsníka, keď je podtlak. Vypnite zariadenie, prstom uvoľnite lievík pumpy z hrudníka a pumpu vyberte.
25. Nepoužívajte odsávačku počas tehotenstva, pretože odsávanie môže vyvolať pôrod.
26. Nepoužívajte odsávačku materského mlieka, ak sa cítite ospalá.
27. Nevystavujte odsávačku materského mlieka extrémnemu teplu alebo priamemu slnečnému žiareniu.
28. Vždy začnite pumpovať v masážnom režime, aby ste stimulovali relaxačný reflex. Neodsávajte dlhšie ako 5 minút v kuse, pokiaľ nie je možné mlieko odsáť. Skúste pumpovať znova v inú dennú dobu. Pokiaľ sa proces stane veľmi nepríjemným alebo bolestivým, vyberte pumpu a kontaktujte svoju laktačnú poradkyňu.
29. Pred každým použitím výrobok skontrolujte a vymeňte opotrebované diely. Silikónové pohyblivé časti (b, d, fah) sa môžu počas používania opotrebovať. Ak napríklad pokračuje čerpanie s opotrebovanou membránou, mlieko vytečie zo vzduchovej hadice do motorovej jednotky a motorová jednotka sa poškodí.
30. Ak ventil a membrána (g a h) nie sú riadne vyčistené, zanesú sa a nie je možné ich správne používať. Po každom použití odoberte ventil a membránu a nechajte niekoľko minút v prevarenej vode, aby sa odstránili zvyšky mlieka..

11

12

ÚDRŽBA

1. Motorovú jednotku čistite IBA suchou handričkou. Na čistenie nepoužívajte leštiace, abrazívne alebo antibakteriálne prípravky.
2. Pravidelne kontrolujte, či sú pripojenia k vzduchovej komore v poriadku a uistite sa, že ventil kačacieho hrdla neutrpel žiadne poškodenie.
3. Mechanické časti pumpy a zásobníky na mlieko je možné bezpečne umývať v umývačke riadu, ale môže dôjsť k zmene farby od potravín.



Sterilizáciu nesterilizujte ani neumývajte. Voda v hadici môže poškodiť motor.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Plná kontrola vďaka novo vyvinutej mikroprocesorovej technológii.
- Procesy a symboly je možné sledovať na LCD displeji.
- Možno ho použiť s externou nabíjačkou (powerbankou) pre mobilné aplikácie. Externá nabíjačka musí mať kapacitu aspoň 2600 mA.

Model: MMJ2858

Adaptér: Input: 100-240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC
Prevádzková doba: 0-30 Minuten
Hmotnosť: 0.170 kg

Model: MMJ2841

Adaptér: Input: 100-240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC
Prevádzková doba: 0-30 Minuten
Hmotnosť: 0.150 kg



Elektronická dvojitá odsávačka materského mlieka s USB pripojením

Komponenty produktu

- Valcové veko
- Silikónová membrána
- Teleso čerpadla
- Komfortné upevnenie
- Ventil
- Cumlík fľaše, viečko, tesniaci kotúč a tesniaci krúžok
- 1 x zásobník na materské mlieko (150 ml) 1 x telo fľaše (250 ml)
- Základňa stojana pre nádoby na skladovanie materského mlieka
- Skriňa motora
- Vzduchová hadica
- Vzduchová hadica – vložka motorovej jednotky
- Zástrčka
- AC/DC adaptér a kábel



Elektronická odsávačka materského mlieka s USB pripojením

Komponenty produktu

- Valcové veko
- Silikónová membrána
- Teleso čerpadla
- Komfortné upevnenie
- Ventil
- Cumlík fľaše, viečko, tesniaci kotúč a tesniaci krúžok
- Nádoba na uskladnenie materského mlieka 150 ml
- Stojan na skladovacie nádoby
- Skriňa motora
- Vzduchová hadica
- Vzduchová hadica – vložka motorovej jednotky
- AC/DC adaptér a kábel

NIKDY nesterilizujte tieto časti: i, j, k, l, m


13

14

MONTÁŽ

Skôr ako začnete s montážou, starostlivo si umyte ruky.

Pred použitím umyte a sterilizujte časti pumpy, ktoré prichádzajú do styku s materským mliekom.

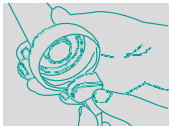

Zatlačte ventil do telesa čerpadla.



Vložte silikónovú membránu do tela pumpy a uistite sa, že je tesná.



Umiestnite valcový kryt na telo čerpadla.



Pripojte vzduchovú hadicu k valcovému veku.



Zostavte dojčenskú fľašu/úložnú nádobu na teleso čerpadla.




Keď ste na cestách, pripojte konektor USB k zdroju USB.




Dvojitá odsávačka

Vložte druhý koniec vzduchovej trubice do konektora motorovej jednotky.

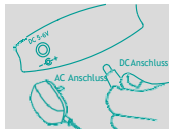

Dvojitá odsávačka

Kovovú zástrčku na konci kábla adaptéra pevne zasuňte do vstupu adaptéra motorovej jednotky (5V-6V) a zástrčku adaptéra do elektrickej siete (110V-220V).

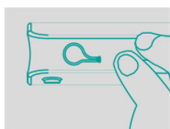

Dvojitá odsávačka

Pokiaľ potrebujete čerpadlo používať samostatne, uistite sa, že druhý prívod vzduchu je pevne uzavretý zátkou. Inak vaše čerpadlo nebude sáť.



Single odsávačka

Vložte druhý koniec vzduchovej trubice do konektora motorovej jednotky.



Single odsávačka

Kovovú zástrčku na konci kábla adaptéra pevne zasuňte do vstupu adaptéra motorovej jednotky (5V-6V) a zástrčku adaptéra do elektrickej siete (110V-220V).


POKyny PRE LED DISPLEJ

Mamajoo Odsávačka materského mlieka USB elektrická - Double




LED displej

- Režim masáže/sania s jedným čerpadlom
- Režim dvojitej masáže/sania
- Tlačidlo pre zapnutie, vypnutie a voľbu jednoduchého, dvojitého čerpadla
- Tlačidlo pre zníženie sily sania
- Tlačidlo pre zvýšenie sily sania
- LED displej úrovne

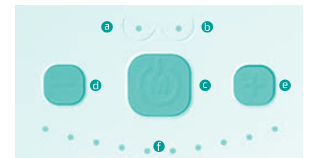


Odsávačka materského mlieka USB elektrická - Single

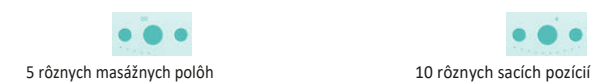

LED displej

- Režim masáže
- Režim odsávania
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia a jednoduché, dvojité nastavenie
- Tlačidlo pre zníženie sacieho výkonu
- Tlačidlo pre zvýšenie sacieho výkonu
- LED displej úrovne

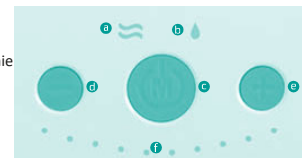

15

16

POUŽITIE

Prevádzka siete:

1. Uistite sa, že je čerpadlo správne namontované.
 2. Pokiaľ chcete svoju dvojitú odsávačku Mamajoo používať samostatne, uzavrite prosím pevne druhú hadicu zátkami na odsávačke.
 3. Posadte sa do pohodlného kresla a relaxujte, vezmite pumpu do ruky, ktorá vám uľahčí jej ovládanie. Pumpu nepoužívajte v ľahu.
 4. Umiestnite pohodlný nastavtec pumpy doprostred bradavky a uistite sa, že sedí vzduchotesne a uprostred hrudníka.
 5. Zapojte výrobok do zásuvky, stlačte tlačidlo „on/off“ a spustíte proces vysávania. Odporúčame najprv použiť pumpu v masážnom režime, aby sa simuloval prietok mlieka.
 6. Odsávačky materského mlieka Mamajoo simulujú prirodzený reflex sania dieťaťa.
- 6.1. Keď raz stlačíte tlačidlo zapnutia/vypnutia na Mamajoo Electronic USB Single Breast Pump, rozsvieti sa ľavá horná LED pre masážny režim, keď tlačidlo stlačíte dvakrát, rozsvieti sa pravá horná LED pre režim sania. Masážny režim je navrhnutý tak, aby napodobňoval „relaxačný reflex“, ako by bábätko sálo matkin prsník. Pri prvých 5 masážnych stupňoch nasleduje dlhé sanie po každých 10 krátkych saní. Potom, čo vaše mlieko začne vytekať, stlačte znovu tlačidlo napájania pre spustenie režimu sania. Požadovaný rytmus sania môžete kedykoľvek nastaviť pomocou tlačidla „+“ alebo „-“ v jednej z 10 polôh sania. Mamičky s citlivými bradavkami môžu odsávať aj masážnym spôsobom. Vďaka novo vyvinutej mikroprocesorovej technológii sa pri ďalšom použití spustí v naposledy použitom režime.
- 6.2. Akonáhle stlačíte tlačidlo zapnutia/vypnutia, elektronická dvojitá/jednoduchá pumpa Mamajoo sa spustí s režimom jednoduchého odsávania, takže si mamičky môžu vybrať medzi jednoduchým alebo dvojitým odsávaním. V oboch režimoch sania sú prvé 4 úrovne (0-4) pre masážny režim a od 5 do 10 je 5 úrovní pre režim sania. Masážna poloha napodobňuje normálny rytmus sania bábätka. Na prebudenie reflexu úniku. V prvých 4 masážnych úrovniach nasleduje dlhé sanie po každých 10 krátkych saní. Potom, čo vaše mlieko začne vytekať, znovu stlačte tlačidlo „+“ pre spustenie režimu sania. Rytmus sania si môžete vybrať medzi 5 a 10. Mamičky s citlivými bradavkami môžu sať v masážnom režime. Ak chcete sať individuálne, urobte Uistite sa, že je to váš prípad. Je nastavený režim Single Vďaka novo vyvinutej mikroprocesorovej technológii sa vaše čerpadlo pri budúcom použití spustí v režime jedného sania v naposledy použitom režime.

7. Po dokončení odsávania vypnite odsávačku materského mlieka stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na 2 sekundy a vytiahnite ju zo zásuvky. Vyberte zásobník na materské mlieko z pumpy. Nasadte si cumlík na fľašu mamajoo a nakŕmte svoje dieťa alebo udržiajte úložnú nádobu uzavretú mamajoo poistnými krúžkami v chladničke alebo mrazničke.
8. Elektronické odsávačky materského mlieka Mamajoo s USB pripojením sa automaticky vypínajú po 30 minútach prevádzky v režime sania.

Prevádzka cez USB pripojenie:

zásade nie sú veľké rozdiely, pokiaľ produkt prevádzkujete s externou nabíjačkou. Svoje zariadenie môžete pripojiť k externej batérii, powerbanke, počítaču alebo nabíjačke pomocou USB kábla. Uistite sa, že je zaručené uvedené napätie.

VAROVANIE

Výrobky je možné prepravovať iba v pôvodnom obale, v súlade s pokynmi na obale, mimo dosahu radiátorov, ohňa a otrasov.

Distribútor pre SR:
KEOP Trading s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČO: 10774955
Email: info@mamajoo.sk